

TREATMENT AND PREVENTION FOR DUST MITE ALLERGY

✓ Relieves allergic symptoms by attracting the dust mites & allowing you to eliminate them

INSTRUCTIONS FOR USE

PREPARE THE MATTRESS AND PILLOWS

- Remove comforters and mattress protectors from the mattress
- Cover the entire mattress and pillows with a textile*
*Different types of textile can be used (100% cotton) such as bed linen and towels.

TO ATTRACT THE DUST MITES INTO THE TEXTILE

- Spray the ExAller® solution evenly over the entire surface of the textile being used (single bed mattress: 24 sprays; double bed mattress: 48 sprays; per pillow: 3 sprays)
- Remove the textile after minimum one hour and maximum two hours

TO REMOVE THE DUST MITES OUT OF THE TEXTILE

- Wash the textile in the washing machine (60°C) – do not use fabric conditioner

TO REMOVE THE ALLERGENS FROM THE MATTRESS AND PILLOWS

- It's important to vacuum the mattress and pillows after using ExAller® for the first three applications

DOSAGE

TO ELIMINATE THE DUST MITES: use once a week for the first three weeks

TO PREVENT FURTHER OCCURENCE: use once a month

PRODUCT FORMATS

75 ml: 4 applications for a single bed
150 ml: 4 applications for a double bed
or 8 applications for a single bed
300 ml: 8 applications for a double bed
or 16 applications for a single bed

COMPOSITION

Solution based on natural plant extract

STORAGE CONDITIONS

ExAller® solution must be stored at a temperature between 5°C and 25°C

WARNING

- Shake the ExAller® solution well before each use
- When first using ExAller® solution remove the aluminium seal and attach the spray
- Do not use if the packaging is damaged
- Do not leave within the reach of children
- Avoid any contact with the eyes
- Do not use after the expiry date indicated on the bottle
- This product has not been tested in children under 3 years of age as well as pregnant or lactating women
- Any serious incident related to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the patient is established
- If symptoms persist, consult your doctor

For more information: www.exaller.com

Acar'Up Consumer Health SPRL
Clos Chapelle-aux-Champs, 30
1200 BRUSSELS
BELGIUM



Last revision date: April2021_V1



TRAITEMENT ET PRÉVENTION DE L'ALLERGIE AUX ACARIENS

✓ Soulage les symptômes allergiques en attirant les acariens et en vous permettant de les éliminer

MODE D'EMPLOI

PRÉPARER LE MATELAS ET LES OREILLERS

- Enlever les couettes et les protège-matelas du matelas
- Couvrir le matelas et les oreillers avec un textile*
* Différents types de textiles peuvent être utilisés (100% coton) comme par exemple des draps de lit ou des serviettes de bain.

POUR ATTIRER LES ACARIENS DANS LE TEXTILE

- Pulvériser uniformément la solution ExAller® sur toute la surface du textile utilisé (matelas lit simple : 24 vaporisations; matelas lit double : 48 vaporisations; par coussin : 3 vaporisations)
- Enlever le textile après au minimum une heure et au maximum deux heures

POUR ÉLIMINER LES ACARIENS DU TEXTILE

- Laver le textile à la machine à laver (60°C)
- Ne pas utiliser d'adoucissant

POUR ÉLIMINER LES ALLERGÈNES DU MATELAS ET DES OREILLERS

- Il est important de passer l'aspirateur sur le matelas et les oreillers après l'utilisation de la solution ExAller® lors des trois premières applications

DOSAGE

POUR ÉLIMINER LES ACARIENS : utiliser une fois par semaine pendant les trois premières semaines

POUR EMPÊCHER TOUTE NOUVELLE INFESTATION : utiliser une fois par mois

FORMATS DU PRODUIT

75 ml : 4 applications pour un lit simple
150 ml : 4 applications pour un lit double
ou 8 applications pour un lit simple
300 ml : 8 applications pour un lit double
ou 16 applications pour un lit simple

COMPOSITION

Solution à base d'extraits végétaux naturels

CONDITIONS DE STOCKAGE

La solution ExAller® doit être conservée à une température comprise entre 5°C et 25°C

AVERTISSEMENT

- Bien agiter la solution ExAller® avant chaque utilisation
- Lors de la première utilisation de la solution ExAller®, retirer l'opercule d'étanchéité en aluminium et fixer le pulvérisateur
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Ne pas laisser à la portée des enfants
- Éviter tout contact avec les yeux
- Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le flacon
- Ce produit n'a pas été testé chez les enfants de moins de 3 ans ainsi que chez les femmes enceintes ou allaitantes
- Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le patient est établi
- En cas de persistance des symptômes, consultez votre médecin

Pour plus d'informations : www.exaller.com

Acar'Up Consumer Health SPRL
Clos Chapelle-aux-Champs, 30
1200 BRUSSELS
BELGIQUE



Dernière modification : Avril2021_V1



BEHANDLUNG & PRÄVENTION VON STAUBMILBENALLERGIE

✓ Lindert Allergiesymptome durch Anlocken der Staubmilben und deren Eliminierung

ANLEITUNG

VORBEREITEN VON MATRATZE UND KISSEN

- Entfernen Sie Bettdecke und Matratzenauflagen von der Matratze
- Decken Sie die gesamte Matratze und Kissen mit einer Textile ab*
- * Es können unterschiedliche Textilarten verwendet werden (100% Baumwolle), wie Bettlaken und Handtücher.

ANLOCKEN VON STAUBMILBEN IN DIE TEXTILIE

- Sprühen Sie die ExAller® Lösung gleichmäßig über die gesamte Fläche der Textile (Einzelbett: 24 Pumpstöße / Doppelbett: 48 Pumpstöße / Kissen: 3 Pumpstöße)
- Entfernen Sie die Textile nach mindestens einer Stunde und maximal zwei Stunden Einwirkzeit

DIE STAUBMILBEN AUS DER TEXTILIE ENTFERNEN

- Waschen Sie die Textile in der Waschmaschine (60°C) - Verwenden Sie keinen Weichspüler

ENTFERNEN DER ALLERGENE AUS MATRATZE UND KISSEN

- Es ist wichtig, die Matratze und Kissen nach dem Einsatz der ExAller® Lösung bei den ersten drei Anwendungen abzusaugen

DOSIERUNG

ZUM AUSTILGEN VON STAUBMILBEN: die ersten drei Wochen lang ein Mal pro Woche anwenden

UM EIN WEITERES AUFTRETEN ZU VERHINDERN: ein Mal pro Monat anwenden

PRODUKTFORMATE

75 ml: 4 Anwendungen für ein Einzelbett
150 ml: 4 Anwendungen für ein Doppelbett
oder 8 Anwendungen für ein Einzelbett
300 ml: 8 Anwendungen für ein Doppelbett
oder 16 Anwendungen für ein Einzelbett

ZUSAMMENSETZUNG

Lösung basierend auf natürlichem Pflanzenextrakt

LAGERBEDINGUNGEN

Die ExAller® Lösung muss bei einer Temperatur zwischen 5°C und 25°C gelagert werden

ACHTUNG

- Schütteln Sie die ExAller® Lösung vor der Anwendung gut durch
- Wenn Sie die ExAller® Lösung das erste Mal verwenden, entfernen Sie die Aluminiumversiegelung und setzen Sie den Sprühkopf auf
- Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist
- Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Augenkontakt vermeiden
- Nicht nach dem Verfalldatum auf der Flasche verwenden
- Dieses Produkt wurde nicht an Kindern unter 3 Jahren, schwangeren oder stillenden Frauen getestet
- Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Patient niedergelassen ist, gemeldet werden
- Wenn die Symptome anhalten, suchen Sie Ihren Arzt auf

Weitere Informationen: www.exaller.com

Acar'Up Consumer Health SPRL
Clos Chapelle-aux-Champs, 30
1200 BRUSSELS
BELGIEN



Letzte Änderung: April2021_V1



BEHANDELING & PREVENTIE VAN HUISSTOFMIJTALLERGIE

✓ Vermindert allergische symptomen door de huisstofmijten aan te trekken zodat u ze kunt verwijderen

GEbruIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING VAN DE MATRAS EN HOOFDKUSSENS

- Verwijder de matrasbeschermer vanonder het beddelaken
- Bedek de volledige matras en de hoofdkussens elk met een textiel*
- * Verschillende soorten textiel kunnen gebruikt worden (100% katoen) zoals beddelakens of badhanddoeken.

HUISSTOFMIJTEN AANTREKKEN IN HET TEXTIEL

- Verstuf de ExAller® spray over de ganse oppervlakte van het textiel (matras enkel bed: 24 verstuivingen; matras dubbel bed: 48 verstuivingen; per hoofdkussens: 3 verstuivingen)
- Verwijder het textiel na minimum één uur en maximum twee uren

VERWIJDER DE HUISSTOFMIJTEN UIT HET TEXTIEL

- Was het textiel in de wasmachine (60°C) - vermijd het gebruik van een wasverzachter

VERWIJDER DE ALLERGENEN OP DE MATRAS EN DE HOOFDKUSSENS

- Het is belangrijk om de matras en de hoofdkussens te stofzuigen na de eerste drie behandelingen met ExAller® spray

TOEPASSING

OM DE HUISSTOFMIJTEN TE VERWIJDEREN:

1x per week gedurende de eerste 3 weken

OM HERPOPULATIE TE VOORKOMEN: 1x per maand

VERKRIJGBARE PRODUCTEN

75 ml: 4 behandelingen voor een enkel bed
150ml: 4 behandelingen voor een dubbel bed of 8 behandelingen voor een enkel bed
300 ml: 8 behandelingen voor een dubbel bed of 16 behandelingen voor een enkel bed

SAMENSTELLING

Oplossing op basis van plantenextracten

BEWAREN


ExAller® spray moet bewaard worden bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C

WAARSCHUWING

- Goed schudden voor elk gebruik
- Bij een eerste gebruik, eerst de aluminiumfolie verwijderen en de spray aanbrengen
- Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is
- Buiten het bereik van kinderen houden
- Vermijd contact met de ogen
- Niet gebruiken na vervaldatum
- Dit product werd niet getest bij kinderen jonger dan 3 jaar en op zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
- Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de patiënt is gevestigd
- Als de symptomen aanhouden, raadpleeg dan uw arts

Voor meer informatie: www.exaller.com

 Acar'Up Consumer Health SPRL
Clos Chapelle-aux-Champs, 30
1200 BRUSSELS
BELGIË

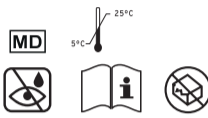

Laatste revisie: April2021_V1

TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELL'ALLERGIA AGLI ACARI

✓ Allevia i sintomi allergici eliminando la fonte degli allergeni

ISTRUZIONI PER L'USO

PREPARARE IL MATERASSO E I CUSCINI

- Togliere coperte e coprimaterasso dal materasso
- Coprire l'intero materasso e i cuscini con un tessuto*
- * È possibile utilizzare diversi tipi di tessuto (100% cotone) come biancheria da letto o asciugamani.

UTILIZZARE LA SOLUZIONE EXALLER

- Spruzzare uniformemente la soluzione ExAller® su tutta la superficie del tessuto (letto singolo: 24 spruzzi / letto matrimoniale: 48 spruzzi / cuscino: 3 spruzzi)
- Rimuovere il tessuto dopo un minimo di 1 ora e un massimo di 2 ore

PER RIMUOVERE GLI ACARI DELLA POLVERE DAL TESSUTO

- Lavare il tessuto in lavatrice (60°C) - non usare ammorbidente per tessuti

PER RIMUOVERE GLI ALLERGENI DAL MATERASSO E DAI CUSCINI

- È importante passare l'aspirapolvere al materasso e i cuscini dopo aver utilizzato la soluzione ExAller® per le prime tre applicazioni

DOSAGGIO

PER ELIMINARE LA FONTE DI ALLERGENI:

utilizzare una volta alla settimana per le prime tre settimane

PER PREVENIRE LA PRODUZIONE DI ALLERGENI:

utilizzare una volta al mese
 Acar'Up Consumer Health SPRL
Clos Chapelle-aux-Champs, 30
1200 BRUSSELS
BELGIO

FORMATI DEL PRODOTTO

75 ml: 4 applicazioni per un letto singolo
150 ml: 4 applicazioni per un letto matrimoniale o 8 applicazioni per un letto singolo
300 ml: 8 applicazioni per un letto matrimoniale o 16 applicazioni per un letto singolo

COMPOSIZIONE

Soluzione a base di estratto vegetale naturale

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

La soluzione ExAller® deve essere conservata a una temperatura compresa tra 5°C e 25°C

AVVERTENZA

- Agitare bene la soluzione ExAller® prima di ogni utilizzo
- Quando si utilizza la soluzione ExAller® per la prima volta rimuovere il sigillo in alluminio e applicare la testa di spruzzo
- Non utilizzare se la confezione è danneggiata
- Conservare fuori dalla portata dei bambini
- Evitare qualsiasi contatto con gli occhi
- Non usare dopo la data di scadenza indicata sul flacone
- Questo prodotto non è stato testato sui bambini sotto i 3 anni, le donne in gravidanza o in allattamento
- Qualsiasi incidente grave legato al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il paziente
- Se i sintomi persistono, consultare il medico.

Per maggiori informazioni: www.exaller.com

Ultima modifica: aprile2021_V1

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA ALERGIA A LOS ÁCAROS

✓ Alivio de los síntomas de la alergia al atraer a los ácaros y permitirle eliminarlos

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DEL COLCHÓN Y LAS ALMOHADAS

- Retire los edredones y las fundas del colchón
- Cubra por completo el colchón y las almohadas con una tela*
- * Se pueden utilizar distintos tipos de tejido (100% algodón), como ropa de cama o toallas.

PARA ATRAER A LOS ÁCAROS A LA TELA

- Rocíe la solución ExAller® de manera uniforme por toda la superficie de la tela utilizada (colchón de cama individual: 24 vaporizaciones; colchón de cama doble: 48 vaporizaciones; cada almohada: 3 vaporizaciones)
- Espere entre una y dos horas como máximo y retire la tela

PARA ELIMINAR LOS ÁCAROS DE LA TELA

- Lave la tela en la lavadora (60 °C)
- No utilice suavizante

PARA ELIMINAR LOS ALÉRGICOS DEL COLCHÓN Y LAS ALMOHADAS

- Es importante aspirar el colchón y las almohadas después de los tres primeros usos de ExAller®

DOSIS

PARA ELIMINAR LOS ÁCAROS: utilizar una vez a la semana durante las tres primeras semanas

PARA EVITAR QUE VUELVAN A APARECER: utilizar una vez al mes

FORMATOS DEL PRODUCTO

75 ml: 4 usos para una cama individual
150 ml: 4 usos para una cama doble u 8 usos para una cama individual
300 ml: 8 usos para una cama doble u 16 usos para una cama individual

COMPOSICIÓN

Solución a base de extractos vegetales naturales

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

La solución ExAller® debe almacenarse a una temperatura entre 5 °C y 25 °C

ADVERTENCIA

- Agite bien la solución ExAller® antes de cada uso
- Retire el sello de aluminio y acople el pulverizador al utilizar la solución ExAller® por primera vez
- No utilice el producto si el envase está dañado
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Evite el contacto con los ojos
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en el bote
- Este producto no se ha probado con niños menores de 3 años ni con mujeres embarazadas o lactantes
- Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el paciente
- Si los síntomas persisten, consulte a su médico

Para más información: www.exaller.com

 Acar'Up Consumer Health SPRL
Clos Chapelle-aux-Champs, 30
1200 BRUSELAS
BÉLGICA



Fecha de la última revisión: Abril2021_V1